

Внимание

Во избежание возгораний, короткого замыкания и прочих факторов риска, убедительная просьба следовать инструкциям ниже:

- 1) В случае, если никто не пользуется массажером, пожалуйста, отключите питание, вынув вилку из розетки.
- 2) Во избежание перегрева, короткого замыкания и прочих негативных факторов, не используйте массажер вплотную к подушкам и одеялу.
- 3) В случае использования массажера детьми, людьми с нарушениями физического развития и инвалидами, необходимо полностью контролировать процесс и не оставлять их без присмотра.
- 4) Следуйте руководству пользователя и не используйте аксессуары и комплектующие иного неизвестного производства.

Опасность

Чтобы сократить риск короткого замыкания, пользуйтесь следующими инструкциями:


- 1) После эксплуатации или перед чисткой массажера, пожалуйста, извлеките вилку из розетки.
- 2) В случае, если массажер оказался в воде, не прикасайтесь к нему до тех пор, пока не отключите питание.
- 3) Не используйте массажер во время принятия душа или ванны.
- 4) Не помещайте в воду и прочие жидкости.

3

2

- Перед использованием убедитесь, что номинальное напряжение в розетке соответствует требованию продукта (DC 12В, 2А).
- Убедитесь, что все контакты соединены и массажер подключен к питанию.
- Не применяйте чрезмерную силу при подсоединении к сети, поломка коннектора приведет к выводу массажера из строя.
- Не используйте массажер в ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влаги.
- При использовании не упирайте массажер в твердую поверхность, это может привести к поломке.
- Продукт имеет подогреваемую поверхность, людям с низкой чувствительностью следует не забывать об этом при использовании.
- При любой неполадке не следует самостоятельно разбирать продукт, обратитесь в сервисный центр.

Внимание

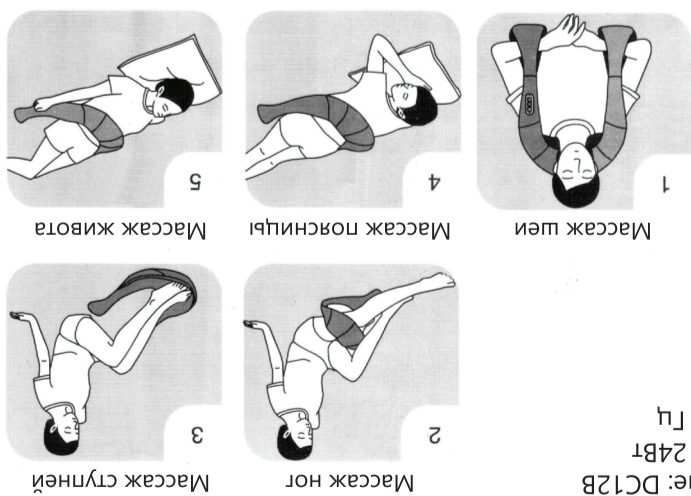

Схема

Наименование: Массажер для шейного отдела
Напряжение: DC12В
Мощность: 24Вт
Частота: 50 Гц

Характеристики



Массажер для шейного отдела

Модель JF-MB01



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

Массаж шеи и плеч
Эргономичный дизайн и структура округлых роликов позволяют плотно и умеренно по силе работать со всеми важными точками.

Уникальный метод массирования
Забудьте о классическом массаже и сконцентрируйтесь на массаже шейного отдела, 4 округлых ролика, двигающихся вверх и вниз позволяют Вам почувствовать настоящее расслабление.

Функция подогрева
Подогрев усилит эффект массажа и придаст дополнительное расслабление шейного отдела.

Комфортное использование как дома, так и за рулем автомобиля
Дополнительный адаптер для прикуривателя автомобиля позволяет получать удовольствие от массажа не только дома, но и за рулем автомобиля, снимая нагрузку во время длительных поездок.

- ускорить кровообращение;
- восстановить обменные процессы в подкожных слоях;
- улучшить качество сна;
- обеспечить бесперебойную работу ЖКТ.

Регулярный массаж поможет наладить важные функции всего организма:



Управление и функции