



Массажер для ног CleverCare компактный с подогревом и компрессией

Артикул ZM-F009-1



Инструкция по эксплуатации

Эта модель представляет собой высокопроизводительный и простой в использовании портативный массажер для ног, который предназначен для снятия напряжения, расслабления ног и общего оздоровления всего организма.

Помогает при болях в мышцах и артрите, онемении, также улучшает кровообращение и улучшает общий тонус организма.

Функции

- Беспроводной, легкий, портативный
- Компрессия и вращающийся массаж
- Функция подогрева для усиления эффекта

Перед первым применением следует полностью зарядить массажер при помощи сетевого кабеля и адаптера, идущих в комплекте. Во время зарядки световой индикатор будет гореть красным цветом, по окончании зарядки свет погаснет.

Технические характеристики


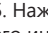
Мощность: 24 Вт
Напряжение: 12,6 В
Емкость встроенной батареи: 2200 мАч
Длительность сеанса: 15 мин
Тип встроенной батареи: Литий-ионная батарея
Время до полной зарядки: 3~3,5 ч
Время автономной работы: 1,5~2 ч
Материал подкладки: Антибактериальная ткань, поглощающая неприятные запахи
Режимы массажа: Компрессия и вибрация
Габариты: 32×15×12 см
Вес: 1,64 кг

Управление



○ Световой индикатор

1. Расположите ногу внутри массажера
2. Нажмите и удерживайте ① в течение 3 секунд

3. С помощью кнопки "М" отрегулируйте интенсивность роликового массажа, световой индикатор будет гореть зеленым светом:
Низкая скорость мигания индикатора - низкая скорость роликового массажа
Быстрая скорость мигания индикатора - средняя скорость роликового массажа (включается по умолчанию)
Постоянный свет индикатора - высокая скорость роликового массажа
4. Нажмите  для регулировки силы компрессионного воздействия, световой индикатор будет гореть синим светом
Низкая скорость мигания индикатора - низкая скорость компрессии
Быстрая скорость мигания индикатора - средняя скорость компрессии
Постоянный свет индикатора - высокая скорость компрессии
5. Нажмите  для включения функции подогрева и регулировки его интенсивности, световой индикатор будет гореть красным светом
Мигающий красный - низкий уровень температуры
Постоянный свет - высокий уровень температуры
6. Для выключения массажера нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, также через 15 минут произойдет автоматическое отключение

Меры предосторожности

- Используйте зарядное устройство, входящее в комплект. Убедитесь, что зарядка перед использованием длилась не менее 4 часов.
- Не погружайте в массажер мокрые ноги.
- Не используйте массажер за рулем или во сне.
- В целях защиты аккумулятора не рекомендуется использовать массажер во время подзарядки.
- Не проводите длительные сеансы массажа (оптимальная длительность по 15 минут на каждую ногу).
- Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения, либо после приема снотворного.
- Убедитесь, что на ногах нет каких-либо украшений до того, как поместите ногу в массажер во избежание поломки воздушного мешка либо самого украшения.
- Убедитесь, что зарядный кабель и адаптер не повреждены, в случае поломки обратитесь к профессионалам.
- Не роняйте устройство.
- Если устройство начало выдавать ошибки в работе, необходимо прекратить его эксплуатацию
- Не пытайтесь разобрать и починить массажер самостоятельно.
- Во время работы и подзарядки массажера не протирайте его какой-либо тканью либо салфетками.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Всегда отсоединяйте адаптер от сети, если массажер находится не под вашим присмотром.
- Не используйте функцию подогрева в течение длительного времени во избежание перегрева.
- Храните и используйте массажер вдали от воды, огня и агрессивной внешней среды.
- Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите применение массажера.

Поиск неисправностей

Если в работе продукта возникла неисправность, обратитесь к приведенной ниже таблице.

Если неисправность не может быть устранена или изделие по-прежнему не работает, отключите питание и обратитесь в сервисный центр для проведения технического обслуживания.

Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно.

Основные жалобы	Возможная причина	Устранение проблемы
Устройство не включается	Проверьте уровень заряда батареи, он может быть слишком низким.	Подзарядите устройство (4 часа)
Устройство не заряжается	Возможно не подключен порт питания к шнуру питания	Переподключите, при корректном подключении кнопка питания начнет мигать
	Возможно повреждена вилка или розетка	Проверьте, нет ли на розетке или на вилке каких-либо повреждений и если заподозрили что-то, обязательно обратитесь к профессионалу для ремонта
	Возможно не совпадают спецификации розетки и зарядного устройства	Уточните заявленные характеристики устройства и сопоставьте со спецификацией розетки
Массажер включается, но не работает	Оставшейся мощности не хватает для работы	Замените устройство

Лица, кому не рекомендовано использование массажера

Если вы относитесь к какой-либо из перечисленных групп, перед применением проконсультируйтесь с врачом.

- Пациенты, перенесшие операции на стопе, отеки и воспаления, гиперемии, тяжелый артрит, травмы и другие заболевания конечностей; болезни сердца, головного мозга и легких; заболевания крови со склонностью к кровотечениям; остеопороз и заболевания мягких тканей; младенцы и беременные женщины.
- Лица, проходящие курс лечения.
- Онкологические больные.
- Больные с острым течением болезни.
- Больные остеопорозом.
- Лица с кардиостимуляторами и прочими имплантированными электроприборами.

Уход и хранение

- Используйте мягкую и сухую ткань для удаления пыли и другой грязи с устройства. Храните в сухом и проветриваемом месте, когда массажер не используется.
- Не оставляйте изделие в местах с высокой температурой, влажностью, а также под прямыми солнечными лучами.
- Когда срок хранения превышает 3 месяца, продукт следует проверить и включить для тестирования.



clevercare.ru



vk.com/clevercare