

МАТРАС МАССАЖНЫЙ С ПОДУШКАМИ

SILVER CLOUD



Благодарим Вас за приобретение продукции CleverCare

Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

Матрас массажный с подушками **CleverCare Silver Cloud** — это эффективное массажное устройство, которое благодаря большой площади активной поверхности может одновременно воздействовать на всё тело: шею, спину, поясницу, ноги. Данное устройство снимает накопившееся за день напряжение, стимулирует кровообращение, улучшает метаболизм и общее самочувствие, способствует улучшению осанки.

Меры предосторожности

- Не подключайте массажер к питанию влажными руками.
- Не используйте массажное устройство в местах с плохой вентиляцией, например, под одеялом, это может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
- Используйте массажер только в сухом помещении, не используйте в ванной комнате.
- Если массажер или его провода повреждены, немедленно прекратите использование устройства.
- Не используйте массажер во время сна.
- После еды в течение 30 минут нельзя пользоваться массажным аппаратом.
- Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения, либо после приема снотворного.
- Не пытайтесь разобрать и починить массажер самостоятельно.
- Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электроме-
дическим оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких или переносными медицинскими устройствами, такими как: электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназ-
ванного медицинского оборудования.
- Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор и т.п.;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.

Уход и хранение


- Перед очисткой массажного аппарата выньте шнур питания из розетки.
- Не используйте для чистки массажера бензол, разжижающее вещество или другие агрессивные растворители.
- Если массажер не используется долгое время, рекомендуется свернуть шнур питания переменного тока, свернуть матрас и хранить его в чистом сухом месте.
- Не храните оборудование при высоких температурах, открытом огне или под прямыми солнечными лучами.
- Используйте оборудование при свете.

Технические характеристики

- Тип массажера: роликовый, вибрационный
- Длительность сеанса: таймер 10/20/30 минут
- Количество режимов: 40
- Питание: от сети 220V
- Номинальное напряжение: 12V
- Мощность: 24 Вт
- Длина матраса: 165 см
- Ширина матраса: 50 см

Комплектация


Массажный матрас, подушка с массажными роликами для шеи, подушка с ароматерапией, пневматическая подушка для поясницы, пульт, инструкция, адаптер питания.

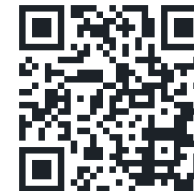

clevercare.ru



Схема продукта

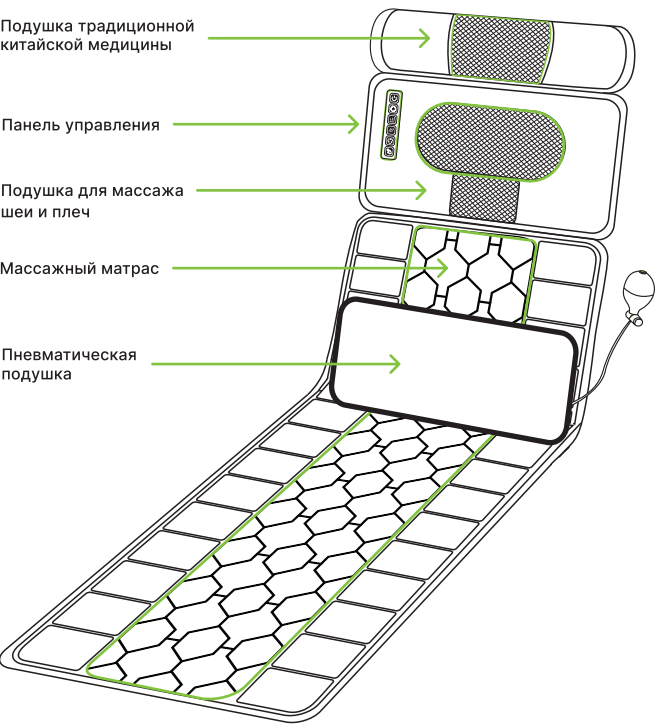

Эксплуатация и управление

Положите массажный матрас на диван, кровать или другую плоскую поверхность, надежно вставьте головку DC адаптера питания и головку DC массажного матраса, вилку питания 220 В воткните в розетку, на пульте высветится «OF», что указывает на то, что массажный матрас включен и готов к работе.

Панель управления на подушке для массажа шеи



Управление массажной подушкой

- **Кнопка вкл./выкл.:** одним нажатием включите/выключите массажер, устройство начнет работать автоматически. После окончания использования подушки, выключите её и выньте адаптер из адаптера матраса.
- **Кнопка направления движения массажных роликов:** одним нажатием выберите направление движения роликов.
- **Кнопка регулировки скорости движения роликов:** одним нажатием выберите 1 из 3 режимов скорости движения массажных роликов.
- **Кнопка нагрева:** одним нажатием включите/выключите функцию нагрева.
- **Кнопка энергосберегающего режима:** однократно нажав на эту кнопку, включится/выключится энергосберегающий режим.
- **Кнопка «умного» режима:** нажмите на кнопку и выберите 1 из 3 предустановленных режимов.

Управление массажным матрасом с помощью пульта




- **Кнопка «Вкл./Выкл.»:** однократным нажатием включите матрас, нажав на кнопку ещё раз, Вы сможете выбрать сеанс массажа продолжительностью 10/20/30 минут. Когда на экране пульта высвечивается знак «OF», устройство выключено.
- **Кнопка «Режим»:** одним нажатием на эту кнопку можно выбрать режим вибрации массажа всего тела. Всего 9 различных режимов массажа — «F1» – «F8» + «AU».
- **Кнопка «Сила»:** нажмите эту кнопку, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность вибрационного массажа. Вам доступны 9 режимов — «S1» – «S9».
- **Кнопка «Скорость»:** однократно нажмите на эту кнопку, чтобы ускорить или замедлить частоту вибрационного массажа, в настройках устройства представлены 9 режимов скорости — «L1» – «L9».
- **Кнопка «Зоны массажа»:** данная кнопка даёт возможность выбрать определенную зону массажа, а именно «P1» — плечи, «P2» — лопатки, «P3» — поясница, «P4» — ноги.

- **Кнопка «Нагрев»:** нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию нагрева массажного матраса. В устройстве представлены 3 режима нагрева — «H1» – «H3», режим «H0» отключает функцию нагрева спины массажного матраса.

Использование пневматическом подушки для поясницы

Частым сжатием груши, надуйте подушку до нужного Вам состояния. Чтобы сдуть подушку, нажмите кнопку выпуска воздуха.

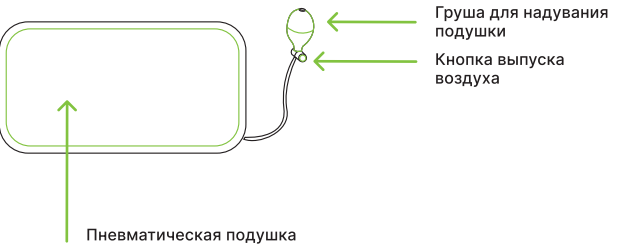

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



clevercare.ru