

clevercare.ru



Массажер для глаз

AST-213BP

Благодарим вас за покупку массажера CleverCare. Перед использованием прочитайте данное руководство и уделите особое внимание вопросам безопасности, чтобы обеспечить правильную работу и эксплуатацию изделия.

Сохраните это руководство, чтобы облегчить дальнейшие запросы.

Техника безопасности	3
Компоненты и функции	5
Кнопочный дисплей	6
Инструкции по эксплуатации	7
Описание зарядки	9
Техобслуживание и защита	10
Устранение неисправностей	11
Технические характеристики	11

2


3

- Запрещается пользоваться устройством лицам, в теле которых имеется медицинское электронное оборудование, такое как кардиостимулятор.
- При наличии онкологических, сердечных заболеваний, гипертонии и т. д., при пользовании этим изделием следует проявлять серьезную осторожность.
- Запрещается пользоваться изделием при температуре тела выше 38°C.
- При использовании, пожалуйста, держите голову слегка приподняты, так вам будет удобнее носить массажер.
- Не отсоединяйте внутренние компоненты изделия, чтобы избежать возможности поломки машины.
- Разбирать, ремонтировать и вносить изменения в изделие могут только специалисты компании-производителя. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к продавцу.
- Не используйте источник питания с напряжением, отличным от номинального, чтобы не вызвать возгорание или повреждение продукта.
- Отсоединяя шнур питания, тяните за вилку шнура питания, а не за сам шнур.
- Не допускайте повреждений, чрезмерного изгиба, растягивания, скручивания, завязывания узлов шнура питания.
- Если шнур питания зарядного устройства поврежден, не разбирайте устройство для его замены, вам следует обратиться к продавцу или к квалифицированному персоналу для замены.
- Используйте зарядное устройство, соответствующее продукту. Если вам нужно заменить зарядное устройство, обратитесь к поставщику товаров либо к квалифицированному специалисту для замены.

4

5

3. Кнопочный дисплей

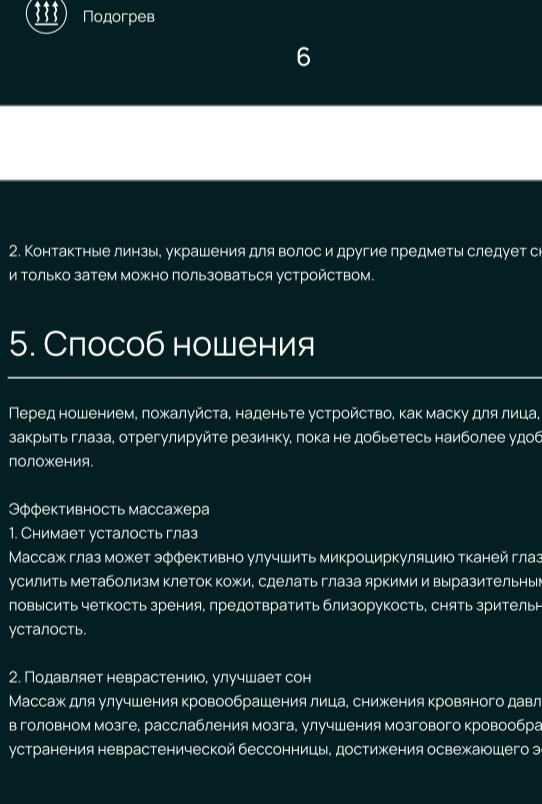

6

4. Инструкции по эксплуатации

1. Нажмите кнопку питания, включится музыка и автоматически надуется воздушная подушка внутри массажера, в то же время загорится световой индикатор давления воздуха.
2. Массажер оснащен встроенной музыкой и возможностью отрегулировать громкость и переключать треки, нажимая плюс или минус. Долгое нажатие кнопки Music + позволит включить/выключить воспроизведение музыки, при удерживании кнопки Music – в течение трех секунд, вы сможете переключить песню.
3. Функции вибрации и подогрева могут быть выбраны в соответствии с вашими требованиями.
4. Если вы используете устройство в общественных местах и не хотите беспокоить других, вы можете использовать наушники.
5. Когда заряда недостаточно, значок батареи мигает красным. Подключите USB-кабель к источнику электричества, загорится индикатор зарядки. Сначала он горит красным светом, изменение цвета на белый означает, что зарядка завершена. Кабель USB можно подключить к компьютеру, вы можете бесплатно загружать и удалять песни, а в это время устройство будет заряжаться.

Внимание:

1. Время выключения, установленное по умолчанию – 15 минут после начала эксплуатации. По прошествии этого времени устройство выключится. Если вы хотите продолжить, нажмите кнопку еще раз.

7


6. Зарядка

- Откройте модуль питания на левой стороне продукта, подключите USB-кабель к зарядному устройству, а затем вставьте штекер постоянного тока в разъем для зарядки устройства.

• Вставьте вилку зарядного устройства в розетку 100-240 В, 50/60 Гц.

• Зарядное устройство подключено, индикатор зарядки загорится.

• Для зарядки аккумулятора потребуется около 3 часов.

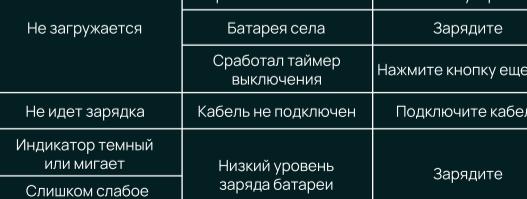

Осторожно!


Во время зарядки пользоваться изделием нельзя. Используйте встроенное зарядное устройство. Не сжимайте шнур питания, чтобы не повредить его.

8

7. Техобслуживание и защита

Обслуживание

- Если изделие загрязнено, протрите его мягкой тканью.
- Если изделие сильно загрязнено, протрите его хлопчатобумажной тканью, пропитанной спиртом.

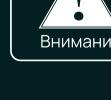

Запрещается очищать это изделие водой или агрессивными жидкостями. В случае проблем с изделием необходимо обратиться к профессиональному техническому персоналу для ремонта, не разбирайте продукт, соблюдайте осторожность.

Защита

- После использования храните устройство в безопасном месте, упакуйте его в пакет, а затем положите в коробку.
- Не ставьте тяжелые предметы на изделие, следите за тем, чтобы оно было защищено от влаги, и механических воздействий.



Не допускайте воздействия на устройство высокой температуры или горячей воды.

Пожалуйста, оградите детей от данного изделия.

9

8. Устранение неисправностей

Явление	Возможные причины	Устранение
Не загружается	Устройство выключено	Включите устройство
	Батарея села	Зарядите
	Сработал таймер выключения	Нажмите кнопку еще раз
Не идет зарядка	Кабель не подключен	Подключите кабель
	Низкий уровень заряда батареи	Зарядите

PS: Если возникли другие проблемы, обратитесь к продавцу для ремонта и обслуживания, не разбирайте изделие самостоятельно.

9. Технические характеристики

Название изделия	Массажер для глаз	Мощность	< 6 Вт
Карта TF	128 Мб	Напряжение	DC 3,7 В
Источник питания	DC 5 В, 1000 мА	Рабочая сила тока	300-1300 мА

10

11