


Вакуумный очиститель пор с функцией теплого компресса CleverCare

Модель К005

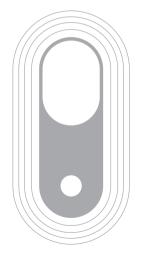

Инструкция по эксплуатации

Описание продукта

Вакуумный очиститель пор с функцией горячего компресса – это инновационный продукт, который быстро и безопасно извлекает из ваших пор накопившуюся грязь и остатки косметики. Работая по принципу динамического воздушного давления, очиститель пор удалит все черные точки, мелкие жировики и акне, делая вашу кожу чистой, свежей и здоровой.

Пошаговая инструкция

Перед использованием рекомендуется распарить лицо при помощи сауны для лица, горячего полотенца, либо специальных косметических средств.

- 1. Установите выбранную вами насадку.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для начала работы. По умолчанию включится режим L (низкая скорость).

 3. Попробуйте аппарат на области запястья до начала
- процедуры чтобы убедиться в отсутствии аллергических реакций. Если никаких неудобств процедура не вызывает, можно начать использовать на лице. Выберете необходимую вам скорость, исходя из типа кожи и личных ощущений, переключая режимы нажатием кнопки включения (L сухая кожа, М нормальная и комбинированная, Н жирная кожа).
- 4. Если вы хотите включить функцию компресса, нажмите один раз на кнопку включения.
- 5. После процедуры, выключите устройство, длительным (3 секунды) нажатием на кнопку включения.
- 6. Очиститель пор отключится автоматически через 30 минут, если не будут совершаться никакие действия после его включения
- 7. Когда световой индикатор начнет мигать, это означает, что пора зарядить встроенный аккумулятор. Он также будет мигать и в процессе зарядки, свет станет стабильным после того, как аккумулятор будет полностью заряжен.

Основные функции


Очищение пор

Закрепите насадку над черной точкой, она присосется к ней. После чего плавно и аккуратно проводите устройством надо всеми зонами, которые хотите очистить до тех пор, пока не заметите видимый результат. Следите за скоростью движений, если вести прибором быстро - можно повредить кожу.

Сокращение мимических морщин

Приложите плоскую насадку к уголкам глаз, губ, к носогубной складке и тд. проведите с небольшим нажимом и повторите действие несколько раз. Это позволит подтянуть кожу, повысить ее эластичность, тем самым сократить мелкие морщины, предотвратить появление новых, сделав кожу здоровой и красивой.

Схема продукта

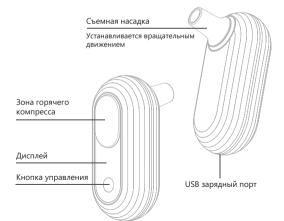

Кнопка управления

Длительное нажатие приведет к включению / выключению устройства. Короткое однократное нажатие - переключение режима (скорости).

Дисплей

L – низкая скорость, М – средняя скорость, Н – высокая скорость. НОТ – горячий компресс.

Подзарядка

При зарядке, все три буквы (LMH) начнут мигать, после того, как аккумулятор будет полностью заряжен - будут просто отображаться на экране.

Съемные насадки

Маленькая круглая

Большая круглая

Плоская

Микрокристаллическая

Маленькая круглая

Слабое всасывание, для тонкой и чувствительной кожи.

Большая круглая

Сильное всасывание, для нормальной и жирной кожи.

Плоская

Сокращает мимические морщинки, при использовании фокус на уголках глаз, носогубной складке и уголках рта.

Микрокристаллическая

Убирает отмершие клетки кожи и отшелушивает кожу.

Основные характеристики

Наименование: Вакуумный очиститель пор с функцией теплого компресса CleverCare Напряжение: 5В

Мощность: 1.6Вт

Температура нагрева: 45°C Мощность всасывания: ≤63 Кра

р- -- 145-

Вес: 145г

Емкость встроенной батареи: 500 мАч

Время зарядки: около 2 ч

Время работы без подзарядки: 130 мин

Рекомендации

- 1. Аппарат не обладает влагозащитой, пожалуйста, тщательно мойте и насухо вытирайте руки перед использованием чтобы избежать загрязнения устройства и избежать необходимости его мытья.
- 2. Не применяйте иные отшелушивающие средства после применения данного продукта, чтобы избежать повреждений кожи.
- 3. Частоту процедуры необходимо подбирать исходя из типа вашей кожи и ее состояния. Для сухой кожи – не чаще, чем раз в неделю, для нормальной и жирной кожи - два раза в неделю. Каждая процедура не должна занимать более 5 минут.
- 4. Не задерживайтесь подолгу на одном участке кожи, чтобы избежать покраснений и иных повреждений кожи.
- 5. После процедуры общее покраснение лица это нормальное явление, которое в течение 30 минут должно пройти.
- 6. Если кожа повреждена и кровоточит, пожалуйста, не используйте данное устройство.
- 7. Данный очиститель не подходит для людей, перенесших косметическую операцию на лице.
- 8. Запрещено использовать следующим категориям людей: несовершеннолетним детям, беременным и кормящим женщинам.



clevercare.ru

