



Пожалуйста, при первом использовании массажера для ног выберите низкий уровень интенсивности. Далее с каждым разом можете повышать уровень интенсивности, опираясь на Ваши ощущения. Если Вы почувствуете какие-либо неприятные ощущения во время массажа, пожалуйста, прекратите использование гаджета. Рекомендуемое время одного сеанса массажа — 30 минут.

### Меры предосторожности

1. Не подключайте массажер к питанию влажными руками.
2. Не используйте массажное устройство в местах с плохой вентиляцией, например, под одеялом, это может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
3. Используйте массажер только в сухом помещении, не используйте в ванной комнате.
4. Если массажер или его провода повреждены, немедленно прекратите использование устройства.
5. Не используйте массажер во время сна.
6. После еды в течение 30 минут нельзя пользоваться массажным аппаратом.
7. Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения, либо после приема снотворного.
8. Не пытайтесь разобрать и починить массажер самостоятельно.
9. Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.
10. Данным массажером могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет под присмотром взрослых.
11. Никогда не используйте данное устройство совместно с электро-медицинским оборудованием и электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф, кардиостимулятор.

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков, остеопороз, переломы ног;
- проходите реабилитацию после операции.

### Уход и хранение

1. Перед очисткой массажного аппарата выньте шнур питания из розетки.
2. Не используйте для чистки массажера бензол, разжижающее вещество или другие агрессивные растворители.
3. Если массажер не используется долгое время, рекомендуется свернуть шнур питания переменного тока, свернуть матрас и хранить его в чистом сухом месте.
4. Не храните оборудование при высоких температурах, открытом огне или под прямыми солнечными лучами.
5. Используйте оборудование при свете.

# МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

# MASSAGE CAPSULA

**URBANFIT**  
Clever Care

## Благодарим Вас за приобретение продукции Urbanfit CleverCare

Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

**Интерьерный массажер для ног Urbanfit CleverCare Massage Capsula** нового поколения, созданный в соответствии с основными принципами сдержанного и практичного оформления, осуществляет высококласный массаж с компрессионным эффектом. Массажер подходит для поддержания здоровья всех ключевых структур нижних конечностей: ахиллова сухожилия, подошвенных фасций, связок, икроножных мышц и мышц стопы. Инновационный дизайн позволит не только идеально вписать его в интерьер, но и использовать его с максимальной выгодой для здоровья!

### Технические характеристики

- **Тип массажера:** роликовый, воздушно-компрессионный
- **Длительность сеанса:** таймер 15 минут
- **Количество режимов:** 10
- **Питание:** от сети, 24V 2A
- **Мощность:** 48 Вт

### Комплектация

- массажер для ног-пуфик
- 2 кабеля,
- инструкция

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.**



urbanfit.pro

Модель Massage Capsula ·  
Артикул CC-111MC




t.me/urbanfit\_pro



vk.com/urbanfit\_pro

### Схема продукта

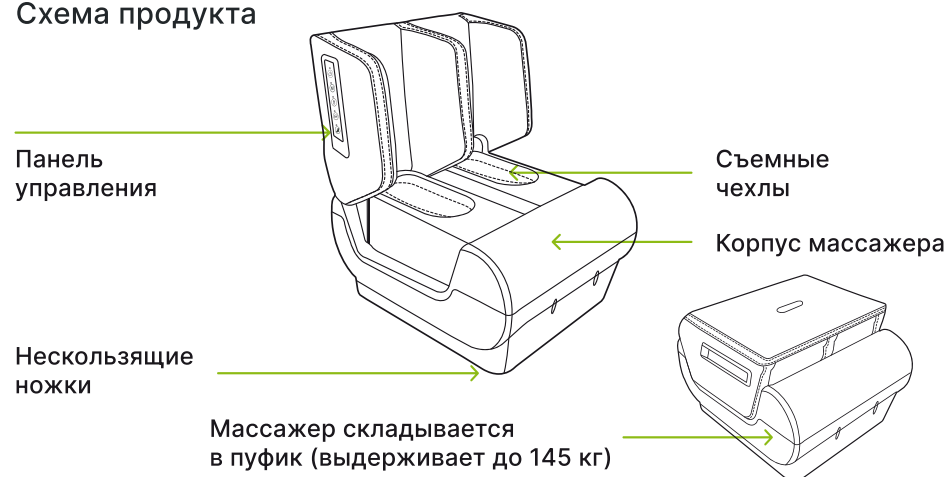

### Эксплуатация и управление



Подключите разъем постоянного тока (DC jack) на основном блоке к вилке питания постоянного тока. Когда вилка переменного тока включена, массажер издаст звуковой сигнал.



**Кнопка вкл/выкл:** нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить массажер, загорится соответствующий зеленый светодиод. После использования массажера, нажмите на эту же кнопку, чтобы выключить питание, соответствующий зеленый светодиод погаснет. Автоматическое отключение массажера для ног через 15 минут.



**Кнопка выбора режима:** коротким нажатием на эту кнопку выберите 1 из 3 режимов массажа. Во время любого из 3 режимов можно регулировать подогрев и компрессию.



**Кнопка подогрева:** короткое нажатие на эту кнопку позволит включить 1 из 2 уровней подогрева:

- зеленый светодиод — низкий уровень подогрева;
- красный светодиод — высокий уровень подогрева.

Функцию подогрева можно отключить, нажав на кнопку ещё раз. В таком случае светодиоды гореть не будут.



**Кнопка включения/выключения компрессии:** коротким нажатием на эту кнопку включите или выключите воздушно-компрессионный массаж икроножных мышц.



**Кнопка регулировки компрессии:** выберите 1 из 3 режимов интенсивности компрессии икр:

- зеленый цвет — низкий уровень интенсивности;
- жёлтый цвет — средний уровень интенсивности;
- красный цвет — высокий уровень интенсивности.

Выбор уровня интенсивности работает только при включенном режиме компрессии (кнопка включения/выключения компрессии).