

Основные характеристики

Наименование: Вакуумный очиститель пор с аквапилингм CleverCare

Входное напряжение: 5В

Напряжение батареи: 3.7В

Входная мощность: 0,8 Вт

Комплектация: очиститель (1 шт.), мягкие насадки (3 шт.), твердые насадки (3 шт.), зарядный кабель USB (1 шт.), набор металлических инструментов (4 шт.)

Подходящие типы кожи: Универсальный.

От типа кожи будет зависеть тип насадки и время воздействия.

Эффективность: Глубоко очищает кожу от остатков макияжа и жирности, вытягивает черные точки, акне, мелкие жировики, восполняет запас влаги в подкожных слоях.

Хранение

Хранить в чистом проветриваемом помещении, без доступа прямых солнечных лучей и иной агрессивной среды.


Вакуумный очиститель пор с аквапилингм

Система глубокого очищения кожи



- Необходим для очищения кожи от ежедневного воздействия косметики. Если в кожу проникают остатки косметики и другие бактерии, могут возникнуть подкожные воспалительные процессы.
- При условии регулярного очищения, нет необходимости отказываться от косметики.
- Вакуумный очиститель глубоко проникает в кожу и выводит все загрязнения, включая черные точки, жировики и акне, кроме того, он обладает функцией отшелушивания.
- Делает кожу здоровой и красивой.

Принцип работы вакуумного очистителя

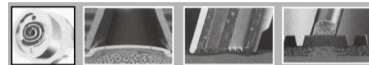

Вакуумный очиститель лица с аквапилингм представляет собой систему вакуума отрицательного давления с аэрацией кожи мелкими пузырьками воды. Он напрямую воздействует на кожу через специальную всасывающую спиральную головку и непрерывно увлажняет ее мелкими аэрированными пузырьками воды, создавая эффект зачистки вытянутых загрязнений.

Комбинация вакуума и аквапилинга с удвоенной силой очищает и увлажняет кожу лица, эффективно помогает приостановить старение, удалить кожный жир и все виды загрязнений, бактерий в подкожных слоях и кожных фолликулах.

Также наполняет кожу полезными веществами и влагой, которые так необходимы коже для того, чтобы быть здоровой, молодой и красивой.

Основные функции продукта



- Отшелушивание и увлажнение, очищение пор.
- При попадании молочной кислоты в поры, растворяется жир и уходят черные точки и мелкие жировики.
- Удаляются старые кератиноциты и на их место вводится высококонцентрированная эмульсия.
- После процедуры, кожа не будет испытывать дефицит влаги, она достаточно увлажнена, гладкая и сияющая.
- Регулируемая доза эмульсии, поступающая через специальную трубочку в кожу, успокаивает клетки.
- Откачка кожного жира, любых загрязнений и омертвевших клеток кожи при помощи мощного вакуумного воздействия.
- Воздействие голубым светом: очищение и обеззараживание
- Голубой свет включается автоматически, когда работает аппарат. В процессе своей работы, он обеззараживает воду внутри резервуара, повышает качество воды, что предупреждает возникновение кожных инфекций.

Комплектация



Очиститель (1 шт.)



Мягкие насадки (3 шт.)
Твердые насадки (3 шт.)



Зарядный кабель USB (1 шт.)

Вакуумный очиститель пор с аквапилинг




1. Отделите резервуар для жидкости от корпуса продукта и залейте водой одну из половинок, вторую оставьте пустой.
2. Присоедините резервуар обратно к корпусу устройства.

Дополнение

1. В комплекте с очистителем вы найдете 6 насадок, включая 3 мягкие и 3 твердые. Насадки малого размера предназначены для проработки носа и любых мелких участков на лице. Более крупные используются для очистки лба, щек, подбородка и других любых более крупных зон. Мягкие насадки желательно использовать людям с тонкой и чувствительной кожей. Подбор насадки происходит исходя из типа кожи, места проработки и субъективных ощущений от использования.
2. Также можно использовать очиститель и без дополнительных насадок, напрямую через вакуумную трубочку.
3. Оптимальным количеством залитой жидкости в резервуар можно считать половину, воды не должно быть слишком много, чтобы она не переливалась и не мешала процессу обработки.

Пошаговая инструкция

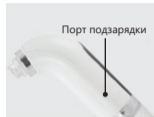


1. Подключите зарядный кабель к разъему на устройстве и поставьте очиститель на подзарядку



2. Включите устройство



3. Выключите, зажав кнопку на 2 секунды

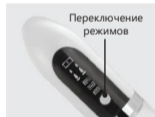

4. 3 регулируемых режима

Дополнение

1. Выбор режима зависит от ваших субъективных ощущений и степени загрязнения кожи.
2. Во время процедуры следует держать аппарат четко вертикально и не трясти его ни в одну из сторон, исключить повороты корпуса и смену положения.

Меры предосторожности

- Не используйте очиститель не по прямому назначению.
- Подбирайте внимательно подходящую вам насадку и режим, чтобы избежать повреждений кожи.
- Слишком длительное и частое использование также могут нанести урон коже, внимательно следите за ощущениями, если коже некомфортно - незамедлительно прекратите применение.
- Желательно использовать специальную жидкость от угревой сыпи и проводить процедуру не чаще 1 раза в неделю
- При использовании вместе в уходовой косметикой, убедитесь, что она подходит для вашего типа кожи.
- Ни в коем случае не храните аппарат в помещении с высокой температурой и влажностью, с высоким содержанием пыли и вблизи открытого огня или прямых солнечных лучей.
- В случае, если продукт не использовался более 7 дней, перед применением необходимо его полностью зарядить, после чего убедиться, что кабель питания отключен.
- Не используйте в процессе подзарядки. Не допускайте полного разряда батареи, это сократит жизненный цикл продукта.
- Для очистки аппарата не используйте химические жидкости.
- Не мойте товар под струей воды или в воде.
- Избегайте агрессивных механических воздействий и самостоятельного разбора корпуса.
- Храните в недоступном для детей месте.

Подзарядка устройства

1. Подключите зарядный кабель к любому подходящему источнику питания USB.
2. Рекомендуется использовать адаптер с напряжением не выше 5В/500 мАч
3. Световой индикатор будет мигать в процессе подзарядки и перестанет после того, как батарея будет полностью заряжена.
4. Для того, чтобы зарядить устройство, необходимо, чтобы оно было выключено.



clevercare.ru



vk.com/clevercare



Вакуумный очиститель пор с аквапилинг
CleverCare



Модель CM018
Инструкция по эксплуатации