



urbanfit.pro

Модель Air Press ·
Артикул CC-199AP



vk.com/urbanfit_pro



t.me/urbanfit_pro

AIR PRESS

URBANFIT
Clever Care

Благодарим Вас за приобретение продукции Urbanfit CleverCare

Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.


Лимфодренажный аппарат для прессотерапии Urbanfit Clever Care Air Press предназначен для проведения комплексной прессотерапии и лимфодренажа в области бедер, икроножных мышц, лодыжек и стоп одновременно. Массажер разработан специально для простого и удобного проведения процедур на дому. Мощный компрессор попеременно нагнетает воздух в воздушных камерах манжет по всей длине ноги. Благодаря липучкам на манжетах достигается плотное обертывание и прилегание. Компрессионный массаж способствует восстановлению венозного кровотока и усилению оттока лимфы, избавляет от мышечных зажимов и отеков ног. Лимфодренаж с помощью этого массажера способствует похудению и эффективен в борьбе с целлюлитом. Функция подогрева в области коленей предназначена для стимулирования кровообращения. Идеально подходит для тех, кто долго стоит на работе на ногах или испытывает дискомфорт, кто ведет сидячий или малоподвижный образ жизни.

Технические характеристики


- Тип массажера: лимфодренажный, компрессионный, антицеллюлитный
- Длительность сеанса: таймер 5, 10, 15, 20, 25, 30 минут
- Рекомендуемое время использования массажера: 60 минут в день
- Номинальное напряжение: DC12v, 2A
- Мощность: 30 Вт
- Размеры каждой части массажера:
 - обхват ступни: 26-36 см
 - обхват икры: 42-50 см
 - обхват бедра: 53-67 см
- Давление воздуха:
 - ступня: от 30 до 38 кПа
 - икры: от 22 до 30 кПа
 - бедра: от 22 до 30 кПа
- Размер массажера: 71,5х25,18 см
- Вес массажера: 1,7 кг

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Схема продукта

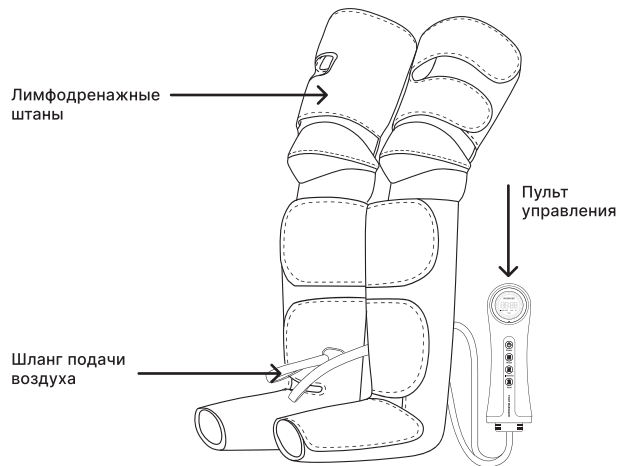


Пульс управления

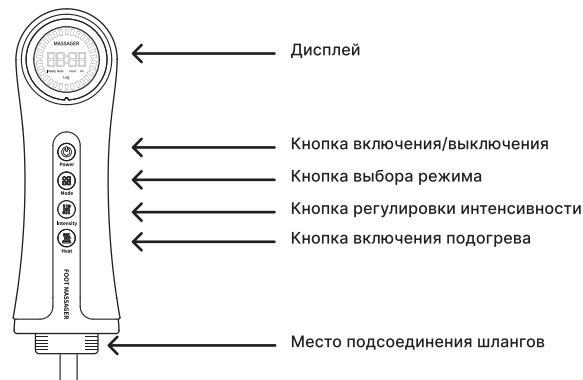


Эксплуатация и управление

- Наденьте манжеты на ноги, плотно зафиксируйте липучками, охватив бедра, колени, икроножные мышцы и стопы.

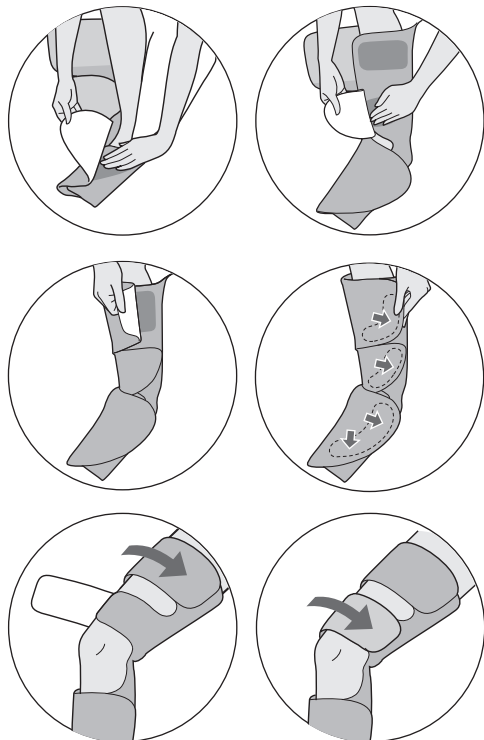

- Не надевайте массажер на джинсы/брюки с молниями и металлическими объектами, это может повредить устройство.


- Подключите шланги для подачи воздуха к разъемам на пульте управления в соответствии с обозначениями на шлангах для подачи воздуха:

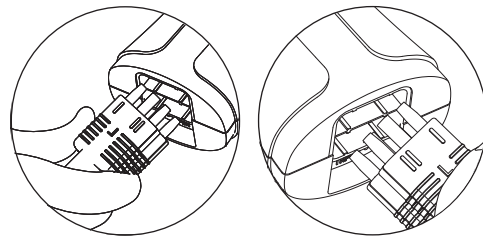

L — для левой ноги

R — для правой ноги

- Подключите массажер к сети питания.
- Коротким нажатием на кнопку «POWER» устройство включится. С помощью этой кнопки выберете время сеанса:

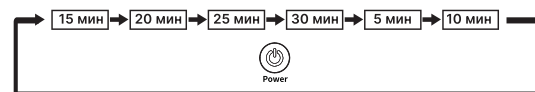

- Долгое нажатие на эту кнопку выключит массажер.
- Кнопка «MODE» позволит выбрать один из трех режимов:



P1 режим последовательности



P2 режим циркуляции



P3 комбинированный режим





Intensity



Heat

- Кнопка **«INTENSITY»** регулирует уровни интенсивности, выберет один из пяти режимов интенсивности.
- Кнопка **«HEAT»** регулирует температуру подогрева коленей:
 - H1: 40°C
 - H2: 45°C
 - H3: 50°C
- Режим **HO** — функция подогрева отключена.

Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим.

При первом появлении боли или дискомфорта, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом!

Меры предосторожности

- Никогда не используйте массажер в непосредственной близости от источников тепла.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали массажер в качестве игрушки.
- Перед чистой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкость не попадала на переключатели и кнопки массажера.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием и электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеуказанного медицинского оборудования.
- Не оставляйте работающий массажер под подушками, одеялами и т.п.
- Не используйте массажер во время сна.
- Используйте массажер только в сухих помещениях.
- Не используйте устройство в ванной комнате, душе, бассейне, сауне и вне закрытых помещений.
- Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор и т.п.;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы и опухоли.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя!

Хранение и уход за массажером

- Перед проведением действий по уходу за массажером убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- После использования массажера дождитесь полного остывания всех его частей.
- Не стирайте массажер в стиральной машине, это приведет к его поломке.
- Для очищения массажера от загрязнений используйте мягкую ткань или губку, слегка смоченную в мягком моющем средстве, затем дождитесь его полного высыхания.
- После применения моющего средства, удалите его следы с поверхности массажера.
- Храните массажер в сухом, защищенном от пыли помещении вдали от источников тепла.
- Не погружайте массажер в воду и не используйте для его очистки абразивные или агрессивные чистящие средства.