




Массажный пояс с подогревом для похудения CleverCare

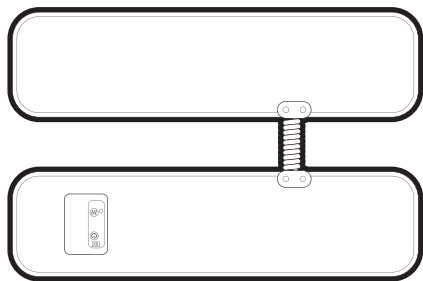

Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за покупку массажного пояса с подогревом CleverCare, который будет служить вам долгие годы при правильном уходе и аккуратной эксплуатации.

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию до начала использования массажного пояса и сохраните ее для соблюдения необходимых мер безопасности.

Комплектация


- 1 x массажный пояс
- 1 x USB кабель
- 1 x мешочек для хранения
- 1 x инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

- Размер: 60 x 17 см
- Входное напряжение зарядки: 5В/1А
- Емкость встроенной батареи: 2000 мАч
- Способ подзарядки: через USB кабель
- Время полной зарядки: 4 ч
- Автоматическое отключение: через 15 мин
- Рабочая температура: от -10°C до 60°C

Настройка и работа устройства

1. Световой индикатор подогрева
2. Кнопка включения подогрева
3. LED индикатор заряда батареи
4. Кнопка вкл./выкл.

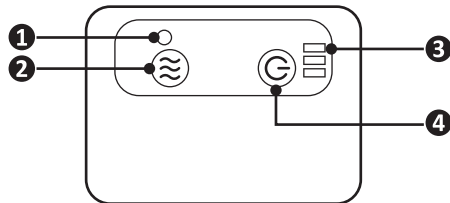

- Нажмите и удерживайте кнопку для включения / выключения пояса, а также для переключения вибро режимов.

Массажный вибро режим:

Режим 1 включится по умолчанию

Режим 2 включится при двукратном нажатии кнопки

Режим 3 включится при трехкратном нажатии кнопки

- Нажмите и удерживайте кнопку для активации функции подогрева. Световой индикатор подаст сигнал о том, что функция активирована.

- При полном заряде батареи все 3 LED индикатора горят синим цветом, по мере снижения заряда уменьшается число синих LED индикаторов. При включении вибро режима LED индикаторы также начнут светиться синим цветом.

- Убедительная просьба полностью зарядить пояс перед первым использованием, либо в случае когда им не пользовались дольше 2 месяцев.
- Не используйте массажный пояс во время его подзарядки.
- Автоотключение произойдет через 15 минут после начала работы.

Меры предосторожности

- Массажный пояс предназначен для снятия боли в пояснице, животе, помощи в избавлении от артрита и судорог в ногах. Массажный пояс НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМЕНОЙ медицинской терапии и специализированного оборудования.
- Ни в коем случае не стирайте продукт в стиральной машине.
- Не применяйте пояс перед сном, т.к. стимуляция вибро массажем может вызвать проблемы с засыпанием.
- Предназначен для частного использования, не следует сдавать его в коммерческую аренду. Используйте только по прямому назначению, все прочие считаются ненадлежащими.

Инструкции по безопасности

Внимательно прочитайте рекомендации ниже для гарантированно верного применения и оптимальной эффективности.

Сохраните рекомендации для дальнейшего пользования.

- Разрешено использование данным поясом лицам, достигшим 8 лет, а также лицам с ограниченными возможностями под присмотром.
- Храните в недоступном для детей и животных месте.
- Не разрешайте детям чистить или ремонтировать продукт без присмотра взрослых.
- При включенной функции подогрева пояс станет горячим, поэтому людям с высокой тепловой чувствительностью в связи с заболеванием или по другим причинам не следует использовать данную функцию.
- Не применять во время беременности, либо проконсультироваться с врачом.
- Людям, носящим кардиостимулятор необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием.
- Не используйте пояс на воспаленных и болезненных участках кожи.
- При любых хронических заболеваниях, либо прочих проблем со здоровьем перед началом использования необходима консультация врача.
- Не используйте поврежденный товар.

Опасность поражения электрическим током и пожара

- Убедитесь, что массажер не находился в воде и на момент использования не мокрый.
- В случае, если жидкость попала в массажный пояс во время подзарядки необходимо извлечь сетевое устройство из розетки. Перед применением необходимо сдать устройство в ремонт.
- Используйте и храните устройство дома, не пользуйтесь на улице, либо в помещении с высокой влажностью.
- Не бросайте и не ударяйте пояс – это может привести к поломке встроенного аккумулятора и к возгоранию.

Хранение и чистка

- 1) НЕ стирайте пояс в машине.
- 2) Всегда выключайте вибро режим и подогрев перед очисткой.
- 3) Очищайте пояс слегка влажной тряпкой. Хорошо просушите изделие после мытья. Не используйте спиртовые салфетки и любую бытовую химию.
- 4) Берегите продукт от прямых солнечных лучей, огня и высоких температур.
- 5) Храните массажный пояс в специальном мешке в сухом прохладном помещении вдали от детей и животных.
- 6) Избегайте контакта с острыми предметами, которые могут причинить вред массажному поясу.

Варианты применения



Разделите на 2 манжета и крепко зафиксируйте на бедрах



Соединив манжеты при помощи липучки, вы получите пояс, который необходимо крепко зафиксировать на талии



Худейте вместе
с CleverCare!



clevercare.ru



vk.com/clevercare