



# Массажер с двумя головками

## CleverCare

модель JF-MS06



### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического прибора всегда необходимо соблюдать базовые меры предосторожности, включая приведенные ниже.

Перед использованием этого прибора прочитайте все инструкции.

**ОПАСНОСТЬ** – Для того, чтобы снизить риск поражения электрическим током:

- 1) Всегда отключайте прибор от электрической розетки сразу после использования и перед чисткой.
- 2) Не дотрагивайтесь до прибора, упавшего в воду.  
Немедленно отключите его от сети.
- 3) Не пользуйтесь прибором во время купания или принятия душа.
- 4) Не помещайте и не храните прибор в местах, где он может упасть или оказаться затянутым в ванну или раковину. Не помещайте и нероняйте прибор в воду или другую жидкость.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Чтобы снизить риск ожогов, пожара, поражения электрическим током или получения других травм:

- 1) Никогда не оставляйте включенный в розетку прибор без присмотра. Отключайте прибор от розетки, когда им не пользуетесь, а также перед тем, как установить или снять компоненты прибора.
- 2) Не используйте под одеялом или под подушкой. Чрезмерный нагрев может привести к возгоранию, поражению электрическим током или получению других травм.
- 3) При использовании этого устройства детьми или людьми с ограниченными возможностями необходимо внимательно наблюдать за ними.
- 4) Используйте этот прибор только по прямому назначению в соответствии с приведенным в данном руководстве описанием. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
- 5) Не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур или вилка питания, если он не работает должным образом, если его уронили, повредили или уронили в воду. Верните прибор в сервисный центр для осмотра и ремонта.
- 6) Не переносите прибор за шнур питания или не используйте шнур в качестве ручки.
- 7) Следите за тем, чтобы шнур питания находился на достаточном расстоянии от нагретых поверхностей.
- 8) Запрещается использовать прибор с заблокированными отверстиями для потока воздуха. Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях не было ворса, волос и т.п.
- 9) Никогда не вставляйте какие-либо предметы в отверстия прибора.
- 10) Не используйте прибор на открытом воздухе.
- 11) Не используйте в местах, где используются аэрозольные продукты (спреи) или там, где используется кислород.
- 12) Для отключения прибора переведите все элементы управления в положение «выключено», затем выньте вилку из розетки.
- 13) Никогда не используйте на мягкой поверхности, такой как кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут оказаться заблокированы.
- 14) Соблюдайте осторожность с нагретыми поверхностями. Прикосновение к ним может привести к серьезным ожогам. Не прикасайтесь прибором к нечувствительной коже или при плохом кровообращении. Использование тепла детьми или лицами с ограниченными возможностями без присмотра может представлять опасность.
- 15) Для снижения риска поражения электрическим током этот прибор оснащен поляризованной вилкой питания (один контакт шире другого). Эта вилка подходит для подключения к поляризованной розетке только одним способом. Если вилка не полностью входит в розетку, переверните вилку. Если она по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки. Ни в коем случае не меняйте вилку.
- 16) Устройство предназначено только для домашнего использования.

**СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ**

## Варианты использования:



Предплечье



Плечо



Талия



Бедро



Нога


## Как пользоваться прибором

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Нажмите кнопку включения-выключения. На приборе начнет мигать красная лампочка.
- 1) При помощи ступенчатого переключателя скорости отрегулируйте интенсивность массажа.
- 2) После использования выключите прибор, нажав кнопку, включения-выключения и выньте вилку из розетки.

## Карта точек массажа на теле

Массаж поясничной области спины

Стимуляция кровообращения

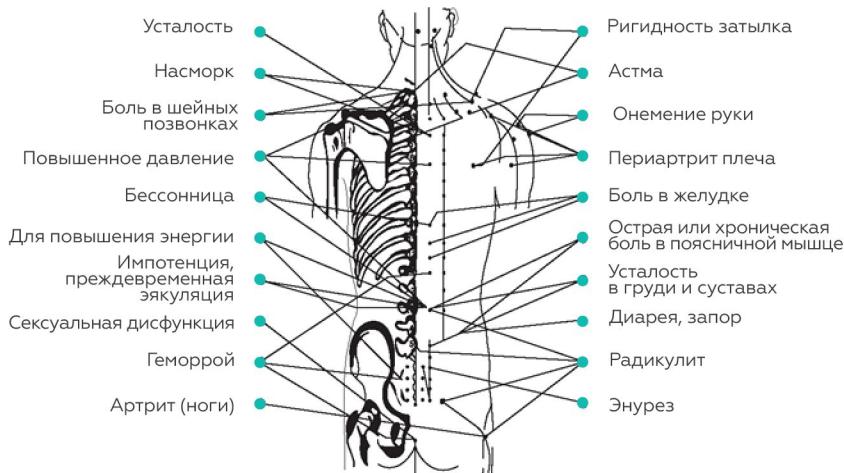

В теле человека имеется около 650 точек для массажа от шеи до талии. Каждая точка связана с какими-то органами или состоянием тела. Массаж может улучшить кровообращение и обмен веществ, повысить способность человека противостоять болезни. Массажер прост в обращении, он доставит вам удовольствие от массажа и послужит улучшению вашего здоровья.

## Технические характеристики

Напряжение: 220 В переменного тока

Частота: 50 Гц

Мощность: 25 Вт

## Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Мотор не работает	Вилка питания не зафиксирована в розетке	Хорошо зафиксируйте вилку в розетке
	Выключатель находится в положении «Выкл»	Проверьте положение выключателя